




Establece tu propio ritmo para la recuperación

InTandem utiliza una combinación de música, sensores de pie y software para mejorar el andar.

Comenzar

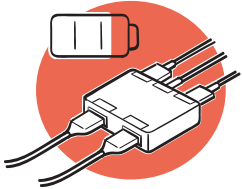

Carga el sistema durante al menos 1 hora.



Conéctate a la red wifi o utiliza el plan de telefonía móvil preinstalado para obtener la música y las actualizaciones más recientes.



Familiarízate con el dispositivo y el manual del usuario.

Tu primera caminata



Elige un lugar seguro para caminar que sea plano y esté nivelado.



Enciende el dispositivo con pantalla táctil y conecta los sensores de pie.




Cuando la música comience, todo lo que necesitas hacer es caminar.

¿Preguntas? Contáctanos

(844) 400-9255

intandemrx.com/support

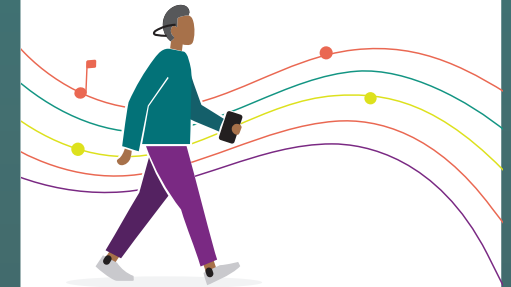

Fabricado por: MedRhythms™, Inc.
183 Middle Street, Suite 300
Portland, ME 04101

Consulta las Instrucciones de uso incluidas para obtener instrucciones, advertencias y precauciones detalladas. IFU002, Rev. B, DEC2023.

© 2023 MedRhythms, Inc. Todos los derechos reservados. MedRhythms e InTandem son marcas comerciales de MedRhythms, Inc.